




# neodisher® PolyKlar

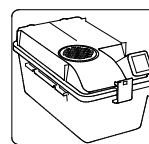

## Öblítőszer állatketrecek gépi előkészítéséhez

### Alkalmazási terület:

- Állatketrecek és tartozékaik, valamint a ketrec-, tároló- és szállítóállványok öblítése a gépi előkészítés során
- Egyéni védőeszközök (PPE)<sup>1</sup> öblítése a gépi előkészítés során.

### A szolgáltatások köre:

- Jelentősen javítja és gyorsítja a száradást, különösen a műanyagok és az elasztomerek száradását
- Alkalmas az állattartásban általánosan használt anyagokhoz, mint például poliszulfon, polikarbonát, polifenilszulfon, poliéterimid és rozsdamentes acél
- Alkalmas az egyéni védőeszközökben használt anyagokhoz, például hőre lágyuló elasztomerekhez és műanyagokhoz (polioximetilén, polikarbonát, PMMA, polivinil-klorid stb.)

### Különleges jellemzők:

- Tenzidektől és savaktól mentes, semlegesíti a lúgos maradványokat
- Kiváló anyagkompatibilitás, különösen alkalmas a feszültség okozta repedésre érzékeny műanyagokhoz, mint például a poliszulfon és a polifenilszulfon

### Alkalmazás és adagolás:

A neodisher PolyKlar speciális tisztítórendszerekben (pl. tisztító és fertőtlenítő berendezések, többfunkciós kabinok stb.) állatketrecek és tartozékok, ketrec-, tároló- és szállítóállványok, valamint egyéni védőeszközök<sup>1</sup> esetében használatos. Az adagolási mennyiség többek között a mosandó tárgy anyagától függ:

Állatketrecek	0,5 – 2,0 ml/l
Egyéni védőeszközök <sup>1</sup>	0,5 – 1,0 ml

Az adagoláshoz megfelelő adagoló berendezést kell használni.

Az állatketrecek és tartozékaik gépi tisztításához a neodisher LaboClean FLA tisztítószeret ajánljuk lúgos eljárás esetén, a neodisher N tisztítószeret pedig savas eljárás esetén.

Az egyéni védőeszközök gépi tisztításához a neodisher MediClean forte tisztítószeret vagy a neodisher Dekonta AF tisztító- és fertőtlenítőszeret ajánljuk.

### Általános használati utasítás:

- Ne keverje más termékekkel.
- Termékcseré előtt öblítse ki vízzel az adagolórendszert és a szivatómlőket is.
- Kizárólag ipari alkalmazásokhoz.
- Vegye figyelembe a tisztítórendszer gyártójának, a tisztító és fertőtlenítő berendezésnek vagy a multifunkciós fülkének a kezelési utasításait.
- Állatketrecek előkészítése: Kérjük, vegye figyelembe az állatketrecek gyártójának előkészítési ajánlásait és a ketrecek előkészítésével foglalkozó munkacsoport (AK KAB) ajánlásait az AK KAB „Ketrecek előkészítése az állattartásban” című kiadványának aktuális számában.
- Az egyéni védőeszközök előkészítése: Kérjük, tartsa be az egyéni védőeszközök<sup>1</sup> gyártójának előkészítési ajánlásait.

### Szakvélemény/Listázás:

a neodisher PolyKlar-t az egyéni védőeszközök<sup>1</sup> jóváhagyásának keretében az anyagkompatibilitás tekintetében különböző vizsgáló és jóváhagyó szervezetek alkalmazták és pozitívan értékelték.

### Műszaki adatok:

pH-érték	3,6 – 3,2 ml/l (0,5 – 2 ml/l, demineralizált vízben, 20 °C-on meghatározva)
Sűrűség	kb. 1,0 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)
Viszkozitás	< 10 mPa s (koncentrációm, 20 °C)



## Összetevők:

A tisztítószer összetevői a 648/2004/EK mosó- és tisztítószer-rendelet szerint:  
< 5% polikarboxilátok  
Ezenkívül tartósítószer  
(klórmetilizotiazolinon/metilizotiazolinon)

## Tárolási utasítások:

A tárolás során a hőmérsékletet 0 °C és 30 °C között kell tartani. Megfelelő tárolás esetén 3 évig tárolható. Felhasználható: lásd a címkén lévő lenyomatot a Szimbólum mögött.

## Veszély és biztonsági utasítások:

Biztonsági és környezetvédelmi információk a biztonsági adatlapokon találhatóak. Ezek elérhetők a [www.drweigert.com](http://www.drweigert.com) oldalon a „Szolgáltatások/letöltések” menüpontban.

Csak üres és lezárt tartályok ártalmatlaníthatók. A töltőanyag-maradványok ártalmatlanítása: lásd a biztonsági adatlapot.

MB 4019/3-3   Állapot: 2021/01

<sup>1</sup> Egyéni védőeszközök, vegyszerek ellen védelmet nyújtó ruházat beleértve a bűváfelszerelést (PPE)

Az ebben az adatlapban szereplő információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. Nem mentesítik a felhasználót a saját tesztek és vizsgálatok elvégzése alól. Ebből nem vezethető le bizonyos tulajdonságok jogilag kötelező erejű biztosítása.