




neodisher® PreStop

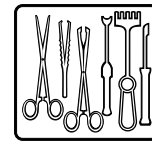

Korróziógátló spray sebészeti eszközök előkezeléséhez

Permethab

Alkalmazási terület:

- Közvetlenül a műtéti használatot követően sebészeti műszerekre permetezhető korrózióvédő

Hatásspektrum:

- Korróziógátlás: nemesacélból készült műszereken megakadályozza a lyukkorrózió kialakulását, amelyet vér vagy fiziológiás sóoldat tartósan felapadt maradványai okozhatnak
- Automatikus előtisztítás már a műtőben
- Sebészeti műszerekhez alkalmas, MIC-műszereket is beleértve
- Az eloxált alumíniumon történő használatra való alkalmassága előzetes vizsgálatot igényel

Különleges tulajdonságok:

- A műszerek nedvesen tartásával akadályozza meg a műtéti maradványok odaszáradását
- Megkönnyíti a későbbi tisztítást
- Gátolja, hogy a kontaktidő alatt mikroorganizmusok szaporodjanak el a műszereken (bakteriosztatikus)

Alkalmazása és adagolása:

A neodisher PreStopot a műtétet követően hígítatlanul permetezze fel habszórával a hulladékkezelési tartályba helyezett sebészeti műszerekre. Ezt követően tartsa lezárva a hulladékkezelési tartályt. A neodisher PreStoppal kezelt műszereket legfeljebb 72 óráig lehet tárolni. Ezt követően gondosan öblítse le, majd a szokott módon készítse elő őket.

Általános tudnivalók a használathoz:

- Csak ipari használatra.
- A neodisher PreStop alkalmazásához használja a vele egy csomagban kapott habszórót.

- Más termékkel nem keverhető.
- A neodisher PreStopot le kell öblíteni (lehetőleg teljesen ásványmentesített) vízzel.
- Az előkészítést a gyógyászati termékekre vonatkozó jogszabályok és az érvényes előírások szerint, megfelelő, validált eljárással kell végezni.
- Kérjük, vegye figyelembe a gyógyászati termék-gyártó előkészítési javaslatait a DIN EN ISO 17664 szabvány követelményeinek megfelelően.

Technikai adatok:

pH-érték	9,5 (koncentrárum, 20 °C)
Sűrűség	kb. 1,0 g/cm ³ (20 °C)

Hatóanyagok:

< 5% anionos és amfoter tenzidek továbbá enzimek és tartósítószer: (3-Iod-2-propinil-butil-karbamát, 1,2 benzotiazol-3(2H)-on), 2-fenoxietanol

CE-jelölés:



A neodisher PreStop megfelel a gyógyászati termékekre vonatkozó európai jogszabályok előírásainak.

Amennyiben súlyos incidens történik a jelen termék használatakor, ezt a gyártó és az illetékes hatóság felé kell jelenteni.

Tárolás:

0–25°C közötti hőmérsékleten tárolandó. A tartályt tárolja szorosan lezárva. Napfénytől védett helyen tárolandó. Szakszerű tárolás esetén 2 évig használható. Felhasználható: lásd a címkén a szimbólum mögött nyomtatott dátumot.



neodisher® PreStop

Veszélyre vonatkozó és biztonsági tudnivalók:

A neodisher PreStop az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet értelmében nem veszélyes anyag.

A göngyöleget csak teljesen kiürítve és lezárt állapotban szabad ártalmatlanítani. A termék maradékainak ártalmatlanítása: lásd a biztonsági adatlapot.

További biztonsági és környezetvédelmi információk a biztonsági adatlapokon találhatóak. Ezek a www.drweigert.hu honlapon, a „Dokumentáció/Letöltések” fülön érhetők el.

MB 4086/2-5 Állapot: 02/2025

A jelen tájékoztató lap adatai jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak. Nem mentesítik a felhasználót a saját ellenőrzési és kipróbálási kötelezettségtől. Ezek nem biztosítják jogilag kötelező érvénnyel, hogy bizonyos tulajdonságok fennállnak.