




neodisher® PreStop



Corrosieremmer ter voorbereiding van chirurgische instrumenten

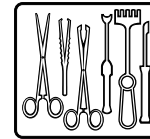

Sprayschuim

Toepassingsgebied

- Corrosiewerend middel om onmiddellijk na gebruik bij operaties op chirurgische instrumenten te sproeien

Overzicht van prestaties

- Corrosieremmer: voorkomt putcorrosie op roestvrijstalen instrumenten, die kan ontstaan door aanhechting van resten van bloed of een fysiologische zoutoplossing
- Zelfwerkzame voorreiniging, al in de OK
- Geschikt voor chirurgische instrumenten incl. MIC-instrumenten
- Geanodiseerd aluminium moet op geschiktheid worden getest.

Bijzondere eigenschappen

- Voorkomt dat residuen van de operatie indrogen door de instrumenten vochtig te houden.
- Vergemakkelijkt de latere reiniging.
- Remt de groei van micro-organismen op de instrumenten tijdens de contacttijd (bacteriostatisch).

Toepassing en dosering

Onverdunde neodisher PreStop met de schuimspray onmiddellijk na de operatie volledig bevochtigend op de in de afvoercontainer geplaatste chirurgische instrumenten aanbrengen. De afvoercontainer moet naderhand afgesloten blijven. De met neodisher PreStop behandelde instrumenten mogen tot 72 uur worden bewaard. Aansluitend grondig afspoelen en zoals gebruikelijk reinigen.

Algemene aanwijzingen voor gebruik

- Alleen voor commerciële toepassingen.
- Gebruik de meegeleverde schuimspray om neodisher PreStop aan te brengen.
- Niet met andere producten mengen.

- neodisher PreStop moet met (bij voorkeur volledig onthard) water worden afgespoeld.
- De reiniging moet conform de wetgeving inzake medische hulpmiddelen en de geldende voorschriften volgens de juiste gevalideerde procedures worden uitgevoerd.
- Neem de reinigingsaanbevelingen van de fabrikant van de medische hulpmiddelen in acht, overeenkomstig de eisen van DIN EN ISO 17664.

Technische gegevens

pH-waarde	9,5 (onverdund, 20 °C)
Dichtheid	ca. 1,0 g/cm ³ (20 °C)

Ingrediënten

< 5 % anionische en amfotere oppervlakteactieve stoffen
daarboven enzymen, conserveermiddelen (3-Iodo-2-propynylbutylcarbamaat, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one), 2-fenoxyethanol

CE-markering:



neodisher PreStop voldoet aan de richtlijnen van de Europese wetgeving inzake medische hulpmiddelen.

Wanneer zich een ernstig incident met dit product voordoet, moet dit aan de fabrikant en de bevoegde instantie worden gemeld.

Aanwijzingen voor opslag

Bij de opslag moet een temperatuur tussen 0 °C en 25 °C worden aangehouden. Verpakking goed gesloten houden. Beschermen tegen zonlicht. Bij correcte opslag is het product 2 jaar bruikbaar. Gebruiken tot: zie vermelding op het etiket na het symbool ☞.

Gevaar- en veiligheidsinstructies

neodisher PreStop is geen gevaarlijke stof volgens CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008.



neodisher® PreStop

Verpakkingen mogen alleen volledig leeg en afgesloten worden verwijderd. Voor het verwijderen van productresten verwijzen we naar het veiligheidsinformatieblad.

Meer veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn beschikbaar op www.drweigert.de in de rubriek "Service/Downloads".

MB 4086/2-5 Versie: 02/2025

De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaringen. Zij ontslaat de gebruiker er niet van om zelf tests en onderzoeken uit te voeren. Hieruit kan geen juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen worden afgeleid.
