




neodisher® PreStop

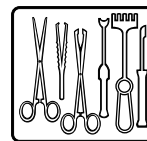

Środek hamujący korozję do wstępnej obróbki narzędzi chirurgicznych

Pianka w sprayu

Obszary zastosowania:

- Inhibitor korozji do spryskiwania narzędzi chirurgicznych bezpośrednio po użyciu w sali operacyjnej

Zakres działania:

- Inhibitor korozji: zapobiega korozji wżernej na narzędziach ze stali szlachetnej, wywołanej przez pozostałości krwi oraz roztworu soli fizjologicznej
- Samoistne mycie wstępne już w sali operacyjnej
- Odpowiedni do narzędzi chirurgicznych, w tym małoinwazyjnych
- Należy wstępnie sprawdzić działanie środka na powierzchni z anodowanego aluminium

Szczególne właściwości:

- Zapobiega zasychaniu pozostałości operacyjnych na narzędziach, dzięki utrzymywaniu ich w stanie wilgotnym
- Ułatwia następujące po tym mycie
- Hamuje rozwój mikroorganizmów na powierzchni narzędzi (działanie bakteriostatyczne)

Użycie i dozowanie:

neodisher PreStop rozprowadzić bez rozcieńczania na narzędziach chirurgicznych znajdujących się w pojemnik do utylizacji, bezpośrednio po ich użyciu w sali operacyjnej. Po spryskaniu pojemnik pozostawić zamknięty. Przygotowane w ten sposób narzędzia mogą być przechowywane do 72 godzin. Następnie starannie spłukać i przeprowadzić standardową obróbkę narzędzi.

Ogólne wskazówki dotyczące użycia:

- Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

- Do aplikacji neodisher PreStop należy używać rozpylacza piany wchodzącego w zakres dostawy.
- Nie mieszać z innymi produktami.
- neodisher PreStop należy spłukać wodą (najlepiej demineralizowaną).
- Dekontaminacja wyrobów medycznych musi być przeprowadzana zgodnie z przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych i obowiązującymi zasadami przy zastosowaniu odpowiednich, zwalidowanych procedur.
- Należy przestrzegać zaleceń producenta wyrobu medycznego dotyczących dekontaminacji zgodnie z wymogami normy DIN EN ISO 17664.

Dane techniczne:

Wartość pH	9,5 (nierozcieńczony, 20°C)
Gęstość	ok. 1,0 g/cm ³ (20°C)

Skład:

< 5% anionowe i amfoteryczne środki powierzchniowo czynne
ponadto enzymy, konserwanty (3-jodo-2-propynylobutylokarbaminian, 1,2-benzotiazol-3(2H)-on), 2-fenoksyetanol

Oznakowanie CE:

neodisher PreStop spełnia wymagania wynikające z europejskich przepisów dotyczących wyrobów medycznych.

W przypadku wystąpienia poważnego incydentu związanego z tym produktem, należy zgłosić go producentowi i właściwym organom.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze od 0 do 25 °C. Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku. Chronić przed światłem słonecznym. Przy prawidłowym przechowywaniu termin przydatności do użycia wynosi 2 lata. Najlepiej



neodisher® PreStop

zużyć przed końcem: patrz nadruk na etykiecie za symbolem .

Informacje dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa:

neodisher PreStop nie jest substancją niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem CLP (WE) nr 1272/2008.

Utylizować tylko puste i szczelnie zamknięte opakowania. Utylizacja pozostałości produktu: patrz karta charakterystyki.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa i ochrony środowiska można znaleźć w kartach charakterystyki. Jest ona dostępna na stronie www.drweigert.de w rubryce „Pliki do pobrania”.

MB 4086/2-5 Stan na: 02/2025

Informacje zawarte w niniejszej ulotce produktowej opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one użytkownika z przeprowadzania własnych testów i prób.



DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hamburg

Tel.: +49-40-7 89 60-0
Fax: +49-40-7 89 60-120

info@drweigert.de
www.drweigert.com