




neodisher[®] SBX

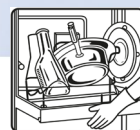

Vízlágyító ágytálak gépi előkészítéséhez

Folyékony koncentrátum

Alkalmazási terület:

- Vízlágyító a vízkőlerakódás elkerüléséhez az ágytálak és kacsák gépi előkészítése során

Hatásspektrum:

- Meggátolja a vízkőlerakódást a gőzképző berendezésekben, a csővezetékben és a fűvókákban

Különleges tulajdonságok:

- Vízkőmegkötéshez alkalmazható
- Bármely vízkeménységnél használható
- Enyhén lúgos kémhatású

Alkalmazása és adagolása:

A neodisher SBX ágytálak és kacsák tisztítására és fertőtlenítésére szolgáló, gőzsterilizálással felszerelt berendezésekben használható.

A termék a gép adagolóján keresztül adagolható – a vízkeménységtől függően 1–3 ml/l szükséges.

A neodisher SBX közvetlenül a gőzképző berendezésbe töltendő vízhez vagy az ágytálmosó azon víztartályába is adagolható, amelyből a berendezés a tisztításhoz és a gőzképzéshez szükséges vizet adagolja.

Makacs szennyeződések esetén ajánlott az ágytálak és kacsák gépi tisztításához kifejlesztett neodisher SBR extra speciális tisztítószer használata is.

Általános tudnivalók a használatához:

- Csak ipari használatra.
- Termékváltás előtt az adagolórendszert és annak szívócsöveit vízzel ki kell öblíteni.
- Az előkészítést a gyógyászati termékekre vonatkozó jogszabályok és az érvényes előírások szerint, megfelelő, validált eljárással kell végezni.
- Kérjük, vegye figyelembe a gyógyászati termék-gyártó előkészítési

javaslatait a DIN EN ISO 17664 szabvány követelményeinek megfelelően.

- Más termékkel nem keverhető.
- Tartsa be a tisztító- és fertőtlenítőberendezés gyártójának kezelési útmutatóit.

Technikai adatok:

| | |
|-------------|--|
| pH-érték | 10,1 - 10,2 (1 - 3 ml/l, sómentes víz esetén, 20 °C) |
| Viszkozitás | < 50 mPa s (koncentrátum, 20 °C) |
| Sűrűség | kb. 1,2 g/cm ³ (20 °C) |

Hatóanyagok:


A tisztítószer alkotórészei a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendelet értelmében:

15–30% polikarboxilátok

CE-jelzés:

A neodisher SBX megfelel a gyógyászati termékekre vonatkozó európai jogszabályok előírásainak. Amennyiben súlyos incidens történik a jelen termék használatakor, ezt a gyártó és az illetékes hatóság felé kell jelenteni.

Tárolás:

Fagymentes helyen tárolandó. Tároláskor tartsa be a 0 °C és 30 °C közötti tárolási hőmérsékletet. Napfénytől védett helyen tárolandó. Szakszerű tárolás esetén 3 évig tárolható. Felhasználható: lásd a címkén a  szimbólum mögött nyomtatott dátumot. A tárolási idő alatt az eredeti, zárt göngyölegekben előfordulhat a folyadék elszíneződése. Az alkalmazástechnikai tulajdonságokat ez nem befolyásolja.



neodisher[®] SBX

Veszélyre vonatkozó és biztonsági tudnivalók:

A neodisher SBX az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet értelmében nem veszélyes anyag.

A göngyöleget csak teljesen kiürítve és lezárt állapotban szabad ártalmatlanítani. A termék maradékainak ártalmatlanítása: lásd a biztonsági adatlapot.

A biztonságra és a környezetvédelemre vonatkozó információk a biztonsági adatlapokon találhatóak. Ezek a www.drweigert.hu honlapon, a „Dokumentáció/Letöltések” fülön érhetők el.

MB 4015/3-4 Állapot: 2024. április

A jelen tájékoztató lap adatai jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak. Nem mentesítik a felhasználót a saját ellenőrzési és kipróbálási kötelezettségtől. Ezek nem biztosítják jogilag kötelező érvénnyel, hogy bizonyos tulajdonságok fennállnak.