




neodisher endo[®] CLEAN



Tisztítószer flexibilis endoszkópok gépi és kézi előkészítéséhez

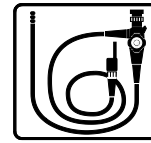

Folyékony koncentrátum

Alkalmazási terület:

- Flexibilis endoszkópok és azok tartozékainak tisztítása tisztító- és fertőtlenítőberendezésekben
- Flexibilis endoszkópok és azok tartozékainak merülő-, ill. ultrahangos fürdőben végzett kézi tisztítása

Hatásspektrum:

- A neodisher endo CLEAN kimagasló hatásfokkal távolítja el az organikus maradványokat, és megakadályozza azok újbóli lerakódását
- Megbízhatóan távolítja el a rászáradt és a denaturált vér maradványait
- Elősegíti a biofilmek eltávolítását
- Megfelel a Robert Koch Intézet (RKI) gyógyászati termékek előkészítésére vonatkozó, a Creutzfeldt–Jakob-szindróma új variánsa (vCJK) átadási kockázatának minimalizálására irányuló aktuális javaslatainak
- Az eloxált alumíniumon történő használatra való alkalmassága előzetes vizsgálatot igényel

Különleges tulajdonságok:

- Kiváló tisztítási teljesítmény a lúgos kémhatású anyagokon, tenzideken és enzimeken alapuló egyedülálló formulának köszönhetően
- Már alacsony hőmérsékleten is hatásos
- Habszegény formulájának köszönhetően nem rontja a tisztítóhatást habképződés
- Kimagasló összeférhetőség más anyagokkal; az összes vezető gyártó endoszkópjaihoz alkalmas
- Kézi előtisztításhoz való használatkor a neodisher endo CLEAN-nel végzett gépi előkészítés előtt nem szükséges leöblíteni a tisztítóoldatot

Alkalmazása és adagolása:

- Az optimális tisztítóhatás érdekében az alábbi paraméterek betartása szükséges:

Flexibilis endoszkópok gépi tisztítása	5 ml/l (0,5%), 35–55 °C, 3–10 perc
Hőálló tartozékok gépi tisztítása	2–10 ml/l (0,2–1%), 40–60 °C, 10 perc
Kézi tisztítás	5–10 ml/l (0,5–1%), max. 40 °C, 5–10 perc

A megfelelő tisztítóhatást a helyszínen, validálással alá kell támasztani.

- Kézi használat esetén, valamint hőálló tartozékok gépi tisztításakor az adagolási mennyiség a szennyezettség mértékétől függően változhat.
- A vízfoltok elkerülése érdekében javasolt teljesen ásványmentesített vizet használni a végső öblítésnél.
- A kézi tisztításhoz használt oldatot legalább minden munkanapon frissen ki kell keverni, és látható szennyeződés esetén azonnal ki kell cserélni.
- A neodisher endo CLEAN, neodisher endo SEPT GA és neodisher endo SEPT PAC egymással optimálisan összehangolt termékek:
A neodisher endo CLEAN a fertőtlenítő programba kerülve sem csökkenti a neodisher endo SEPT GA, ill. a neodisher endo SEPT PAC fertőtlenítő hatását.
- Az adagoláshoz megfelelő adagolókészülékek, ill. adagoló-segédesszközök alkalmazandók.



neodisher endo[®] CLEAN

Általános tudnivalók a használathoz:

- Csak ipari használatra.
- Használat után a neodisher endo CLEAN oldatát (lehetőleg teljesen ásványmentesített) vízzel teljesen le kell öblíteni.
- Termékváltás előtt az adagolórendszert és annak szívócsöveit vízzel ki kell öblíteni.
- Az előkészítést a gyógyászati termékekre vonatkozó jogszabályok és az érvényes előírások szerint, megfelelő, validált eljárással kell végezni.
- Kérjük, vegye figyelembe a gyógyszeráttermék-gyártó előkészítési javaslatait a DIN EN ISO 17664 szabvány követelményeinek megfelelően.
- Tartsa be a tisztító- és fertőtlenítőberendezés gyártójának kezelési útmutatóit.
- Más termékkel nem keverhető.

Technikai adatok:

pH-érték	10,8–11,2 (2–10 ml/l, teljesen ásványmentesített víz esetén, 20 °C) Városi vízben vagy lágyított vízben, valamint pl. sokáig álló előöblítő vízben a pH-érték eltérő lehet.
Viszkozitás	< 10 mPa s (koncentrátum, 20 °C)
Sűrűség	kb. 1,1 g/cm ³ (20 °C)
Titrálási faktor	0,76 (a neodisher endo CLEAN speciális titrálási útmutatója szerint)

Hatóanyagok:

A tisztítószer alkotórészei a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendelet értelmében:
< 5% nem ionos tenzidek, valamint enzimek


CE-jelölés:

A neodisher endo CLEAN megfelel a gyógyászati termékekre vonatkozó európai jogszabályok előírásainak.

Amennyiben súlyos incidens történik a jelen termék használatakor, ezt a gyártó és az illetékes hatóság felé kell jelenteni.

Tárolás:

Hűvös, de fagymentes helyen tárolandó. Napfénytől védett helyen tárolandó. 0 °C - 25 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

Szakszerű tárolás esetén 2 évig tárolható. Felhasználható: lásd a címkén a  szimbólum mögött nyomtatott dátumot.

A tárolási idő alatt az eredeti, zárt göngyölegekben előfordulhat a folyadék elszíneződése. Az alkalmazástechnikai tulajdonságokat ez nem befolyásolja.

Veszélyre vonatkozó és biztonsági tudnivalók:

A neodisher endo CLEAN az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet értelmében nem veszélyes anyag.

A göngyöleget csak teljesen kiürítve és lezárt állapotban szabad ártalmatlanítani. A termék maradékainak ártalmatlanítása: lásd a biztonsági adatlapot.

További biztonsági és környezetvédelmi információk a biztonsági adatlapokon találhatóak. Ezek a www.drweigert.hu honlapon, a „Dokumentáció/Letöltések” fülön érhetők el.

MB 4074/3-7 Állapot: 2022. július

A jelen tájékoztató lap adatai jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak. Nem mentesítik a felhasználót a saját ellenőrzési és kipróbálási kötelezettségétől. Ezek nem biztosítják jogilag kötelező érvénnyel, hogy bizonyos tulajdonságok fennállnak.